

CATETERI HRM A STATO SOLIDO

UN METODO VELOCE E AFFIDABILE PER I TUOI ESAMI DI
MANOMETRIA



AMPIA SCELTA DI CONFIGURAZIONI
FACILITÀ D'USO
AFFIDABILITÀ
PRECISIONE
PULIZIA AVANZATA



CATETERI HRM A STATO SOLIDO

La manometria a stato solido è una tecnica provata da oltre 15 anni che offre una risposta rapida per misurare la vera firma fisiologica. I cateteri riutilizzabili a stato solido non richiedono preparazione allo studio, calibrazione e utilizzano un solo connettore per tutte le pressioni.

LABORIE offre una gamma completa di cateteri a stato solido per:

- HRM e HRIM (esofagea)
- HRAM e HRAM a 360 gradi (anorettale)
- HRCM (colonica)
- HRSM (intestine tenue/antroduodenale)
- Sfintere di Oddi

in una varietà di diametri che vanno da 6 a 14 French, per garantire misurazioni accurate per tutte le tipologie di pazienti. I nostri cateteri arrivano fino a 36 canali di pressione per HRM e 40 canali di pressione per HRAM a 360 gradi. Facoltativamente, è possibile aggiungere canali di impedenza e lumi di infusione.



COSA SIGNIFICA PER TE E PER I TUOI PAZIENTI?

AMPIA SCELTA DI CONFIGURAZIONI


È possibile scegliere tra una vasta gamma di cateteri in configurazione standard e speciali, offrendo soluzioni per pazienti di ogni età, per ciascun tipo di indagine e per ciascun budget. Su richiesta, potremmo persino realizzare un catetere personalizzato su misura per la tua ricerca o per ricerche molto specifiche.

FACILITÀ D'USO

I nostri cateteri a stato solido non necessitano di preparazione o calibrazione dello studio e utilizzano un solo connettore per tutte le pressioni.

AFFIDABILITÀ

L'alta qualità e l'assenza di drift in temperatura dei nostri cateteri li rendono molto adatti anche per esami prolungati, come gli studi di manometria del colon e antroduodenale.

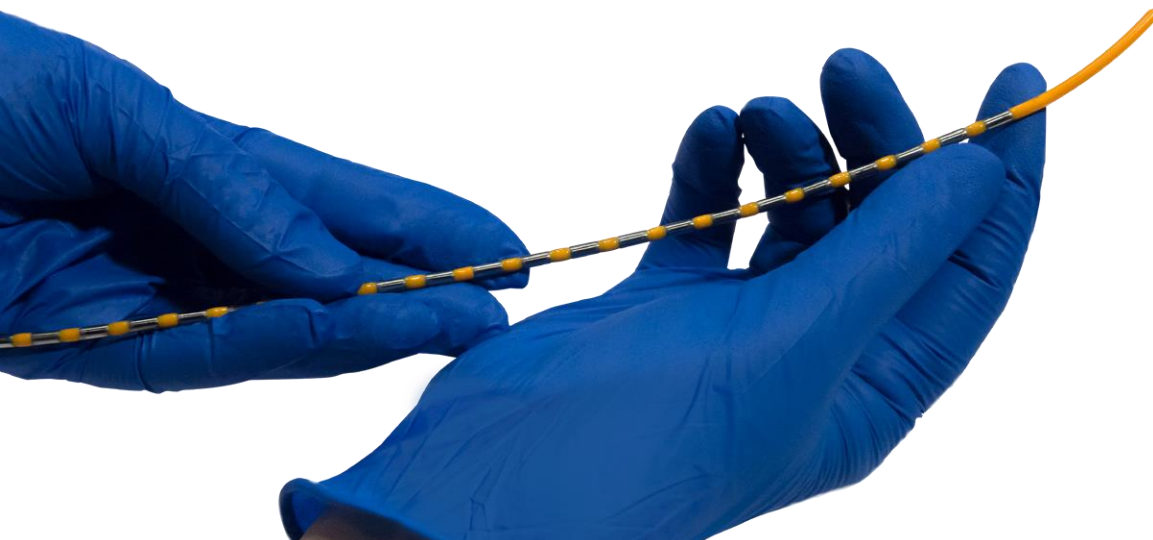


PRECISIONE

I nostri cateteri a stato solido rispetto a quelli della concorrenza non utilizzano sensori capacitivi, che soffrono di una maggiore fragilità oltre che del drift in temperatura. Questo rende impossibile visualizzare le tracce reali durante l'acquisizione del tracciato manometrico. Diversamente i nostri cateteri utilizzano sensori elettronici di ultima generazione che non hanno bisogno di calibrazione e permettono di visualizzare le tracce "vere" durante l'esame.

PULIZIA AVANZATA

I cateteri Unisensor sono gli unici cateteri a stato solido sul mercato che permettono di essere puliti sia meccanicamente in lava endoscopi, piuttosto che manualmente, grazie allo speciale tappo a tenuta stagna. Tutto ciò ti consente di garantire una pulizia superiore rispetto ai cateteri che non prevedono protezione da immersione.

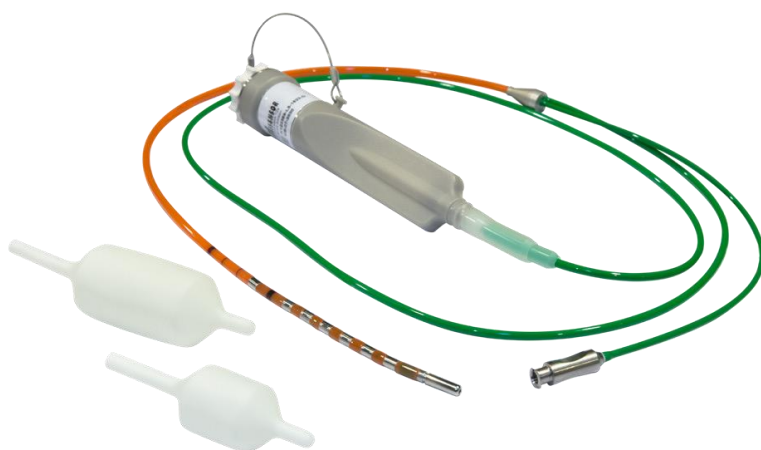

SOLAR GI HRM

IL SISTEMA HRM PIÙ AVANZATO SUL MERCATO

I nostri cateteri a stato solido sono utilizzati al meglio con il sistema HRM Solar GI, attualmente il sistema HRM più avanzato sul mercato, che consente di:

- Eseguire procedure più rapide (solo 10 minuti), più affidabili e più accurate
- Effettuare un'analisi dei dati migliore, più semplice e più rapida
- Riduce i costi della procedura

CONFIGURAZIONI STANDARD PER HRM A STATO SOLIDO

Codici	Esame	# pressioni	Tipo di trasduttori	Diametro	Impedenza
LGK102459-00-1389-D	HRM	24	Tutti unidirezionali, P2 a 180 gradi	10 French	-
LGK103659-00-1102-D	HRM	36	5 circolari (LES), 31 unidirezionali	10 French	-
LGK83659-E-10107-D	HRIM	36	Tutti unidirezionali	8 French	12Z (13 rings)
LGK103659-E-1545-D	HRIM	36	5 circolari (LES), 31 unidirezionali	10 French	16Z (17 rings)
LGK12959-L5-1038-D	HRAM	9	1 per il palloncino, 8 circonferenziali	12 French	-
LGK122359-L5-1623-D	HRAM (3D)	23	Tutti unidirezionali, 5x4 a 90 gradi	12 French	-

Configurazioni Standard: tempo di consegna < 2 settimane

CONFIGURAZIONI SPECIALI PER HRM A STATO SOLIDO

Codici	Esame	# pressioni	Tipo di trasduttori	Diametro	Impedenza
LGK62559-00-1049-D	HRM	25	Tutti unidirezionali	6 French	-
LGK123659-00-1002-D	HRM	36	Tutti circonferenziali	12 French	-
LGK62559-E-1022-D	HRIM	25	Tutti unidirezionali	6 French	12Z (13 rings)
LGK121259-L5-1444-D	HRAM	12	1 per il palloncino, 11 circonferenziali	12 French	-
LGK143659-L6-1612-D	HRM AD	36	Tutti unidirezionali	14 French	-
LGK103659-00-1744-D	HRM AD	36	Tutti unidirezionali	10 French	-
LGK143659-L6-1375-D	HRM Colonic	36	Tutti unidirezionali	14 French	-
LGK143659-L6-1352-D	HRM Colonic	36	Tutti unidirezionali	14 French	-

Configurazioni Speciali: tempo di consegna 6-8 settimane

Configurazioni customizzabili sono possibili su richiesta.

GI OFFICE:
 Tel: +31 20 893 80 80
 Email: GImarketing@laborie.com

De Cuserstraat 93
 1081 CN Amsterdam
 The Netherlands

USA:
 Tel.: +1 800 522 6743
 Email: usmarketing@laborie.com

www.laborie.com
www.mmsinternational.com